


Laser Microscope GUI Manual

1. 화면구성
2. 기능
3. 사용방법

1. 화면구성

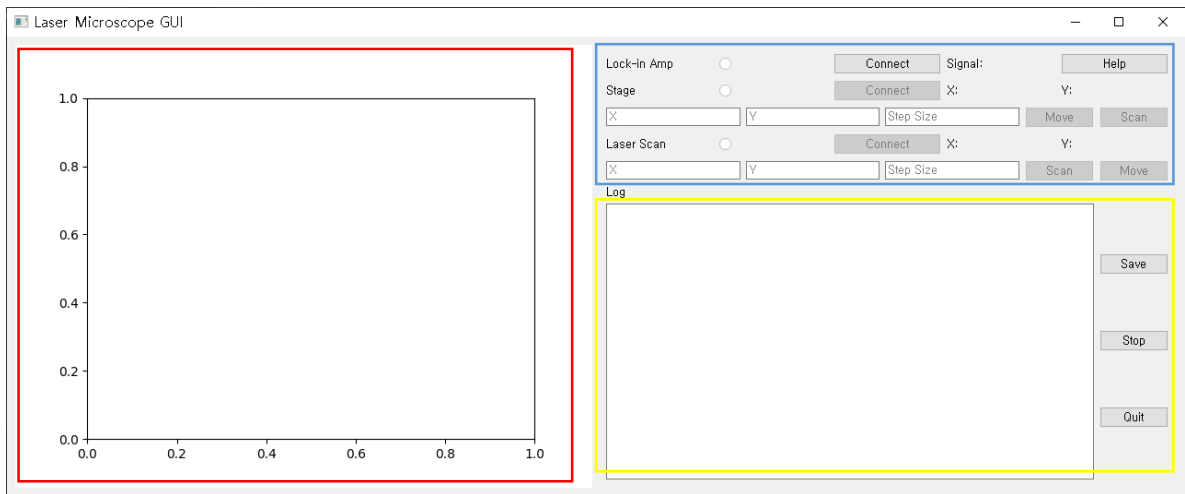

 : 그래프 패널 - 스캔데이터가 실시간으로 보여짐

 : 장비 컨트롤 패널 - 스캐닝 시스템 제어

 : 로그 패널 - 로그가 나옴

— □ ×

Lock-in Amp	<input type="radio"/>	(1)	Connect	Signal:	Help
Stage	<input type="radio"/>	(2)	Connect	X: (3)	Y:
(4)	<input type="text" value="X"/>	<input type="text" value="Y"/>	<input type="text" value="Step Size"/>	(5)	(6)
Laser Scan	<input type="radio"/>		Connect	X:	Y:
	<input type="text" value="X"/>	<input type="text" value="Y"/>	<input type="text" value="Step Size"/>	Scan	Move

(1). Lock-in Amp 연결

(2). Stage 연결 (Lock-in Amp가 먼저 연결되어야 활성화)

(3). Stage x, y위치 표시 (Stage가 연결되면 활성화)

(4). Stage 위치 제어 및 스캔

각각 x위치 y위치 스캔사이즈 설정가능

(5). Stage move (4)에서 입력된 값으로 이동


(6). Stage Scan (4)에서 입력된 값으로 스캔

Laser Scan, Stage Scan 같은 입력 방식을 따름

Scan Area

0,0 위치에서 입력된 x, y값을 end point로 설정하고 Step Size씩 이동

(0,0)

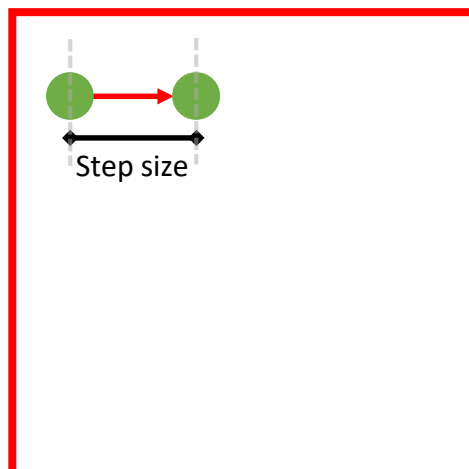

(X,Y)

제작중..